

Caractéristiques Sharpsmart




OUVERTURE LARGE

Dépôt des objets tranchants à une main, en une étape. La forme géométrique de l'ouverture du couvercle procure un accès optimal, et sa grande largeur permet d'y déposer les objets tranchants de grande taille ou de forme inhabituelle. Cette conception minimise les blessures se produisant en faisant le dépôt des objets, et restreint l'accès des mains au contenant de déchets.



ÉTANCHE

Le joint liquide fixé le long de la bordure du couvercle du contenant élimine les fuites de fluides corporels durant le transport. Les contenants d'objets tranchants qui fuient constituent un danger rencontré fréquemment quand les contenants ne sont pas munis d'un joint scellant. Munir les couvercles d'un joint en néoprène élimine les occasions d'être exposés à du sang ou à des fluides corporels.

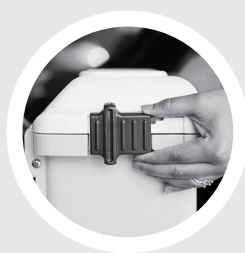

NE SE ROUVRE PAS

Lorsque les mécanismes de verrouillage latéraux sont activés, ils sont inviolables. Cette caractéristique de sécurité empêche les personnes non autorisées d'avoir accès au contenu. La fermeture temporaire permet de déplacer le contenant à l'intérieur de l'établissement de santé de manière sûre et facile.



PLASTIQUE DURCI À ROBUSTESSE MAXIMALE

Le boîtier du contenant Sharpsmart est fait d'un plastique robuste de qualité médicale que les objets tranchants qu'il contient ne sont pas en mesure de pénétrer. Les tests auxquels le contenant Sharpsmart a été soumis ont prouvé que ce dernier résiste à 500 cycles d'utilisation, ce qui démontre la durabilité, la stérilité et la réutilisabilité de ses matériaux.



ÉLIMINE LE TROP-PLEIN

Une fois le contenant plein, le plateau de sécurité intégré se place automatiquement en position verticale et fermée pour empêcher de trop remplir. Ce mécanisme passif de protection contre le trop-plein empêche le personnel de trop remplir le contenant, et élimine le risque de blessures causées par un remplissage excessif.

Contenants à objets tranchants et piquants Sharpsmart

RÉGULIER



S14

Contenant Sharpsmart régulier de 14 litres. Idéal pour les chambres et les zones où le volume d'utilisation d'objets tranchants est faible

Capacité de remplissage : 6,5 litres
285 mm H x 398 mm L x 210 mm P



S22

Contenant Sharpsmart régulier de 22 litres. Convient le mieux aux zones à volume modéré.

Capacité de remplissage : 14,5 litres
446 mm H x 398 mm L x 210 mm P



S32

Contenant Sharpsmart régulier de 32 litres. Pour les zones à grand volume, pour usage avec Cartsmart 1 et les accessoires de support de plancher

Capacité de remplissage : 23,5 litres
618 mm H x 398 mm L x 210 mm P

ACCESS PLUS



S14 AP

Contenant Sharpsmart Access Plus 14 litres
Conçu pour les zones contrôlées où il faut pouvoir faire un dépôt sans restriction d'objets tranchants

Capacité de remplissage : 6,5 litres
285 mm H x 398 mm L x 210 mm P



S32 AP

Contenant Sharpsmart Access Plus 32 litres
Conçu pour les zones contrôlées où il faut pouvoir déposer sans restriction des objets tranchants qui sont longs ou encombrants

Capacité de remplissage : 32 litres
618 mm H x 398 mm L x 210 mm P



S64 AP

Contenant Sharpsmart Access Plus 64 litres
Conçu pour les zones contrôlées qui produisent un grand volume d'objets tranchants qui sont longs ou encombrants

Capacité de remplissage : 47 litres
726 mm H x 398 mm L x 354 mm P